

目录

热辐射实验讲义..... 1

    ( CC1 ) ..... 1

1    背景简述 ..... 2

    1.1    黑体辐射..... 2

    1.2    教学目的..... 4

    1.3    实验设计要点： ..... 5

2    热辐射传感器与热辐射度测量 A ( CC1 ) ..... 6

    【仪器用具】 ..... 6

3    热辐射传感器与热辐射度测量 B ( CC1+A、设计性 ) ..... 17

4    热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的验证 ( CC1+B ) 【实验目的】 ..... 20

# 热辐射实验讲义

( CC1 )

注意：

1. 辐射计是一个非常精细的传感器, 我们不应该往孔洞中插入任何物体。要在指定的场所存放好辐射计。
2. 辐射体温度可高达 $120^{\circ}\text{C}$ ，操作时注意皮肤不能接触辐射表面；建议在辐射表面温度低于 $40^{\circ}\text{C}$ 后再更换辐射体、或必须盖上隔热盖后才能更换辐射体；

# 1 背景简述

热辐射是19世纪发展起来的新学科，其中的“紫外灾难”是孕育近代物理诞生的两朵“乌云”之一，作为量子论的关键性实验，它敲开了量子力学的大门，它所带来的认识世界观念的重大突破。与该实验相关的威廉·维恩、马克斯·普朗克分别获得了1911年和1918年的诺贝尔物理奖。

重温物理学发展中具有里程碑意义的关键实验，是高校实验教学中物理思维体验性教学的重要内容。热辐射不仅仅是一个热学问题，它还涉及到能量转换与传递、光谱学、量子力学等学科与技术领域；在应用方面，其意义也远超电灯的发光效率或（炼钢过程中）钢水温度的测量，它在遥感、热成像、空间散热等应用领域不可或缺。

## 1.1 黑体辐射

物体向外辐射连续的电磁波的现象称为热辐射。物体在向外辐射的同时，还会吸收来自外界的电磁（能量）辐射，且物体辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。

1859年基尔霍夫（G. R. Kirchhoff）从理论上导入了辐射本领、吸收本领和黑体概念，他利用热力学第二定律证明了一切物体的热辐射本领 $r(\nu, T)$ 与吸收本领 $\alpha(\nu, T)$ 成正比，比值仅与频率 $\nu$ 和温度 $T$ 有关，其数学表达式为：

$$\frac{r(\nu, T)}{\alpha(\nu, T)} = F(\nu, T) \quad (1)$$

式中 $F(\nu, T)$ 是一个与物质无关的普适函数。在1861年他进一步指出，在一定温度下用不透光的壁包围起来的空腔中的热辐射等同于黑体的热辐射。1879年，斯特藩

（J. Stefan）从实验中总结出了黑体辐射的辐射本领 $R$ 与物体绝对温度 $T$ 的四次方成正比的结论；1884年，玻耳兹曼对上述结论给出了严格的理论证明，其数学表达式为：

$$R_T = \sigma T^4 \quad (2)$$

即斯特藩-玻耳兹曼定律，其中 $\sigma = 5.673 \times 10^{-12} \text{W/cm}^2 \text{K}^4$ 为玻耳兹曼常数。

1888年，韦伯（H. F. Weber）提出了波长与绝对温度之积是一定的。1893年维恩（wilhelmwien）从理论上进行了证明，其数学表达式为：

$$\lambda_{\max} T = b \quad (3)$$

式中 $b = 2.8978 \times 10^{-3} (\text{m} \cdot \text{K})$ 为一普适常数，随温度的升高，绝对黑体光谱亮度的最大值的波长向短波方向移动，即维恩位移定律。

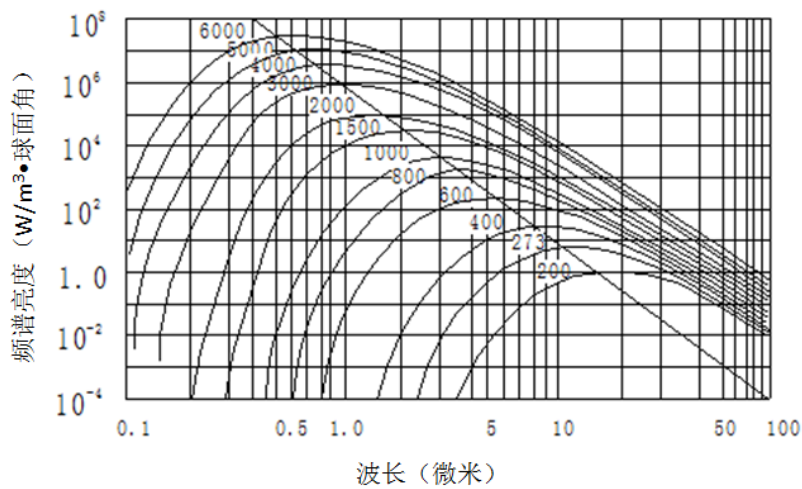


图 1-1 辐射能量与波长的关系

图 1-1显示了黑体不同色温的辐射能量随波长的变化曲线，峰值波长 $\lambda_{\max}$ 与它的绝对温度 $T$ 成反比。1896年维恩推导出黑体辐射谱的函数形式：

$$r_{(\lambda,T)} = \frac{ac^2}{\lambda^5} e^{-\beta c / \lambda T} \quad (4)$$

式中 $\alpha, \beta$ 为常数，该公式与实验数据比较，在短波区域符合的很好，但在长波部分出现系统偏差。为表彰维恩在热辐射研究方面的卓越贡献，1911年授予他诺贝尔物理学奖。

1900年，英国物理学家瑞利（Lord Rayleigh）从能量按自由度均分定律出发，推出了黑体辐射的能量分布公式：

$$r_{(\lambda,T)} = \frac{2\pi c}{\lambda^4} KT \quad (5)$$

该公式被称之为瑞利·金斯公式，公式在长波部分与实验数据较相符，但在短波部分却出现了无穷值，而实验结果是趋于零。这部分严重的背离，被称之为“紫外灾难”。

1900年德国物理学家普朗克（M. Planck），在总结前人工作的基础上，采用内插法将适用于短波的维恩公式和适用于长波的瑞利·金斯公式衔接起来，得到了在所有波段都与实验数据符合的很好的黑体辐射公式：

$$r_{(\lambda,T)} = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{c_2/\lambda T} - 1} \quad (6)$$

式中  $c_1, c_2$  均为常数，但该公式的理论依据当时尚不清楚。

这一研究的结果促使普朗克进一步去探索该公式所蕴含的更深刻的物理本质。他发现如果作如下“量子”假设：对一定频率  $\nu$  的电磁辐射，物体只能以  $h\nu$  为单位吸收或发射它，也就是说，吸收或发射电磁辐射只能以“量子”的方式进行，每个“量子”的能量为： $E = h\nu$ ，称之为能量子。式中  $h$  是一个用实验来确定的比例系数，被称之为普朗克常数，它的数值是  $6.62559 \times 10^{-34}$  焦耳秒。公式（6）中的  $c_1, c_2$  可表述为： $c_1 = 2\pi hc^2, c_2 = ch/k$ ，它们均与普朗克常数相关，分别被称为第一辐射常数和第二辐射常数。

## 1.2 教学目的

1. 认识普遍存在的热辐射现象；通过相对低温的热辐射实验认识影响热辐射的各种因素及其与热辐射的定量关系；
2. 定量测量黑体辐射谱，了解导致量子论产生的普朗克定律；
3. 学习设计实验；
4. 了解黑体辐射在天文学、宇宙学及其航天技术中的应用。

## 1.3 实验设计要点：

### 1. 应用能量守恒定律与能量传递过程

- a) 电加热器的电能（通过焦耳热）转换为热能量；
- b) 热能只能从辐射面向外发射（净能量），从而确定表面温度（并通过红外摄像仪校正）；
- c) 热能以电磁波辐射到外面；
- d) 辐射能（电磁波）到达辐射计探头时，电磁能再转换为热能；并通过热偶堆以电压的形式测出；
- e) 辐射计的校正，包括辐射角，辐射距离；

### 2. 约束条件

- a) 黑体温度范围及安全性指标，辐射源表面最高温度120℃；非辐射源表面温度40℃；
- b) 用经过色温校正的碘钨灯作为辐射源，需要考虑，灯泡玻璃对红外光的透射率对原辐射谱的影响；
- c) 辐射波段需分别用可见光光谱仪和红外光谱仪测量<sup>1</sup>，为此：
  - i. 需要分别对可见光波段与红外光波段光谱仪的校正
  - ii. 可见光波段与红外光波段光谱仪数据提取与连接；【谱仪厂家应提供相应的数据接口】

---

<sup>1</sup> 主要是考虑利用实验室现有的光谱仪，并在此基础上进行有限的补充后能达到实验要求。

## 2 热辐射传感器与热辐射度测量 A (CC1)

### 【实验目的】

- 1、认识普遍存在的热辐射现象及其本质——一种能量转换与传递的形式；
- 2、通过相对低温的热辐射实验认识影响热辐射强度的各种因素及其与热辐射强度的定量关系；包括：
  - a) 辐射体表面温度；
  - b) 辐射距离<sup>2</sup>；（面源辐射修正）
  - c) 表面的发射系数（拓展）；
  - d) 验证上述因素与辐射强度的定量关系是否符合黑体辐射定律？
- 3、了解热辐射传感器（SMTIR9902）原理和结构、使用（含校正）方法；
- 4、学习应用LabView管理由具有NI通信协议的非NI专业仪器（数字多用表）、设备（程控电源）构成的实验系统。

### 【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	黑体辐射与红外测量装置	1	DHRH-B：含带标尺（60cm）位移导轨、辐射器（三种辐射面：黑面、粗面、光滑金属面）、热辐射传感器（SMTIR9902），
2	数字多用表	2	RIGOL DM3058E
3	程控电源	1	RIGOL DP832
4	计算机	1	已安装 LabView 和控温软件，电脑进入 win7-64 位系统

### 【实验注意事项】

1. **实验过程中，禁止触摸辐射体表面**，一方面是避免在高温时烫伤；另一方面避免污染表面，影响发射系数。
2. 测量不同辐射表面对辐射强度影响时，辐射温度不要设置太高，更换辐射体时，

---

<sup>2</sup> 测试点与辐射体表面距离

应带手套。

3. 实验过程中，计算机在采集数据时不要触摸测试架，以免造成对传感器的干扰。
4. 在使用控温程序时，要留意程序是否正常运行，若运行有问题，请及时关闭可编程直流电源的输出，防止辐射器温度过高而损坏。停止运行程序时，要用程序的Stop output按钮，不要用菜单键的红色强制终止按钮。
5. 辐射传感器上方有一块金属挡板。在测量时将挡板移开；非测量时关上，避免不必要的触碰污染传感器表面。

### 【实验原理】

DHRH-B测试台由安装在竖直导轨上的**辐射源**、与辐射源距离可调的**热辐射传感器**组成。**辐射体**由辐射面、安装在辐射面金属（内部）上的并与金属块有良好热接触的陶瓷**加热片**、PT1000**温度传感器**、外围的绝热层以及分别接通加热器和温度传感器的电连接器组成；仪器标配有三种不同辐射面的辐射体（源）。

辐射体的温度通过陶瓷加热器控制，而加热器的功率由程控电源提供，由计算机输出指令控制。【注意，绝热层材料耐温极限为120℃，因此，在控温程序中加入了警报和断电保护。】

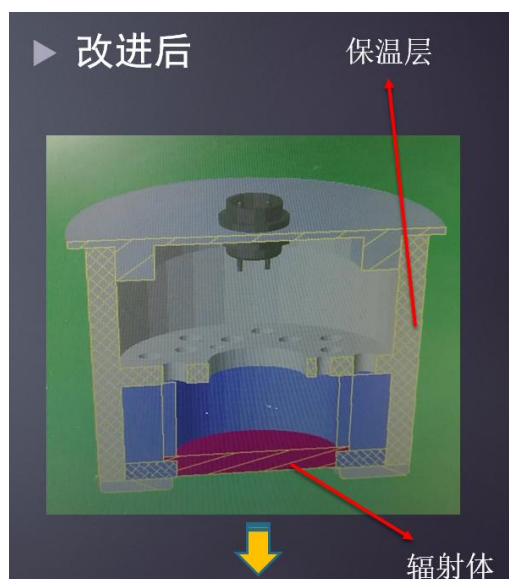


图 2-1 辐射器的内部结构，辐射体是一块不可更换的金属。



**热辐射传感器**原理为N个串联的热电偶（热偶堆），热电偶一端与吸热面（接近黑体）热连接、另一端与传感器外壳热连接。当吸热面受到热辐射时，吸收热能使温度升高，从而使热电偶两端形成温度差产生热电势，其输出电压信号为每个热电偶之热电势的N倍；辐射通量越大，温差越大，输出电压越高。当达到平衡时（SMTIR9902的平衡时间在毫秒量级），热电偶堆热端从辐射中吸收的热量等于它从热端传到冷端的热量，这一热量又正比于热电偶冷热端的温差，从而正比于热偶堆输出的电压（ $Q \propto \Delta T \propto \Delta V$ ）。因此，原则上，SMTIR9902的输出信号正比于当地从辐射方向进入的辐射强度或能流密度。

实验系统中，热辐射传感器的位置可通过导轨上方的手摇臂连续调节；辐射传感器上方提供了一块金属挡板。在测量时可将挡板移开；非测量时关上，避免不必要的触碰污染传感器表面，给测量造成误差。

实际测量中，传感器的信号受多种因素影响，除接收到来自辐射体的热辐射外，它还受到环境（背景）辐射的影响；此外，传感器内的探测面（吸热面）是否黑体，探测面与辐射体之间的辐射角等因素也影响传感器输出信号的大小。因此，不能通过一个预设的校正系数把传感器输出信号直接转换为该地点的辐射强度，通常建议在使用环境下进行**校正**。【设计校正方案的内容，在（CC1+A）实验中完成】

## 【实验内容】（CC1）

### 一、实验系统搭建

- 1、辐射体的安装（见图 2-2所示）。辐射体固定于辐射架的最上端，轻旋旁边的固定螺丝，即可从上方取下辐射体（固定螺丝不要拧太紧，防止损坏外壳）。
- 2、控制系统与数据采集系统的连接。

本实验一共用到2个台式万用表，一个可编程直流电源。其中一台万用表测量辐射体的热敏电阻PT1000（用于温度采集），另一台万用表测量辐射传感器上的电压。接线方式如表 1所示。

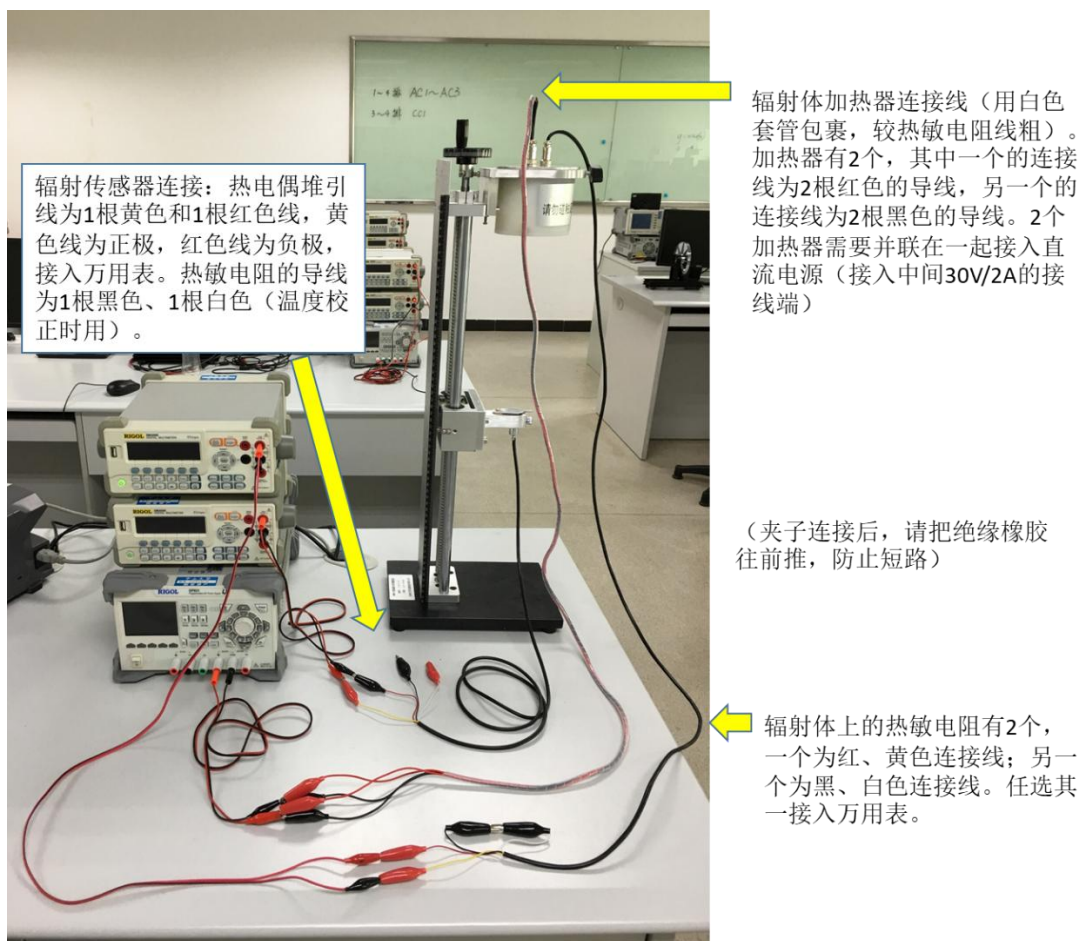


图 2-2 装置实物照

表 1 辐射器与辐射传感器的接线

辐射体部分	热敏电阻PT1000有两个, 实验中任选其一接入万用表  一个为红、黄色连接线;  一个为黑、白色连接线。
	加热器有两个,  一个为红、红色连接线;  一个为黑、黑色连接线。  为了加热均匀, 需要并联在一起接入直流电源 (接入中间1路30V/2A通道)
辐射传感器部分	热电偶堆, 黄色为正极, 红色为负极, 接入万用表
	热敏电阻PT1000, 黑、白色连接线 (校正温度时使用)

### 3、 基于LabView的实验管理编程

PC机上已保存预编好的基于LabView的实验管理程序，放于桌面，文件名为“CC1热辐射实验控温程序”。在运行控温程序前，先进行如下检查

(1)检查所有连线已经正确连接(辐射器的PT1000,辐射器的两组陶瓷加热器，辐射传感器的输出)。

(2) 检查所有仪器与电脑通过USB口通信正常。在桌面找到“NI MAX”快捷方式图标并双击启动Measurement & Automation Explorer (MAX)，在左侧的“我的系统”→设备和接口，鼠标左键点开，可以看到所有连接电脑的仪器设备，其中有三个USB设备，2个为DM3000 SERIES，1个为DP800 Serials，这就是连接电脑的三台设备。每台设备都有自己的唯一地址，例如

“USB0::0x1AB1::0x09C4::DM3R174001751::INSTR”，DM代表台式表DM3058E的英文首字母，后面数字为仪器序列号，为简单起见，利用后四位数字区分每台仪器的USB地址，并和实验台上放置的仪器对应起来。具体如图 2-3所示。

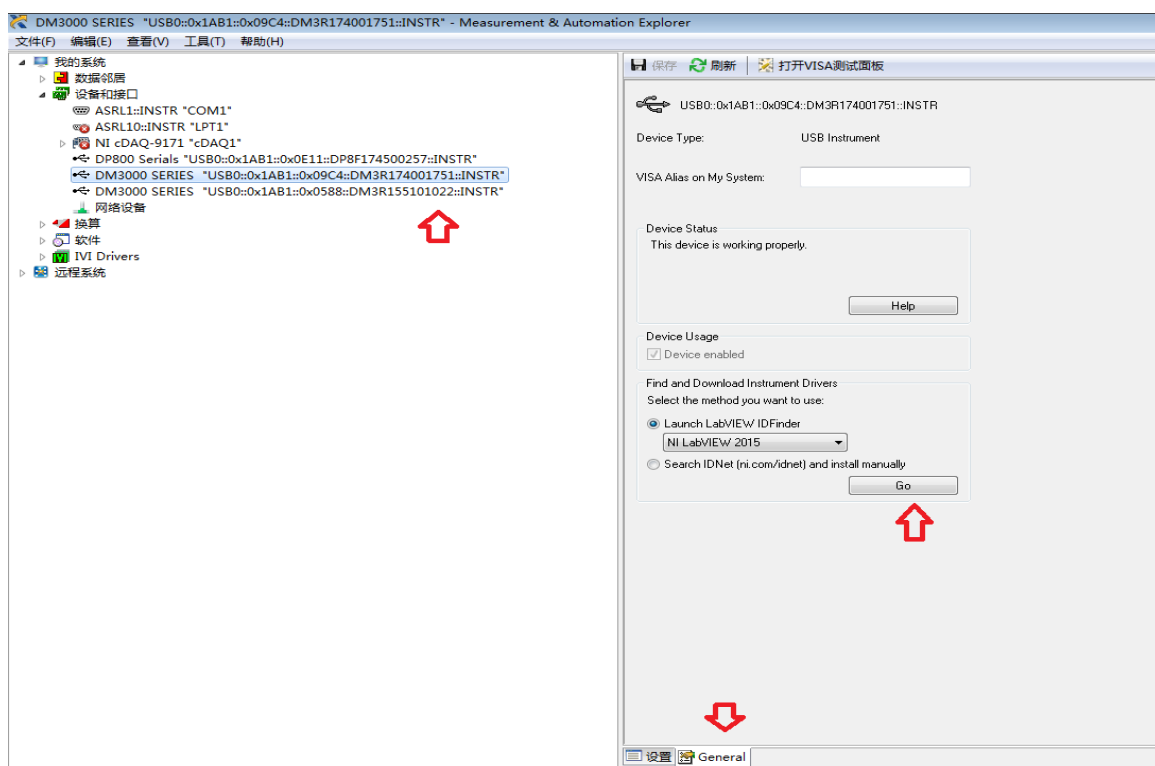


图 2-3 Measurement & Automation Explorer (MAX) 界面

(3)检查Labview对仪器的识别。在MAX界面，找到General，选择Launch Labview

IDFinder后点Go，进入NI仪器驱动程序查找器，点开“已连接的仪器”，在这个目录下，如果看到DP832和两个DM3058E，就说明3台仪器识别正常。如图 2-4所示。

(4) 这时就可以双击放于桌面，文件名为“CC1 热辐射实验控温程序”。

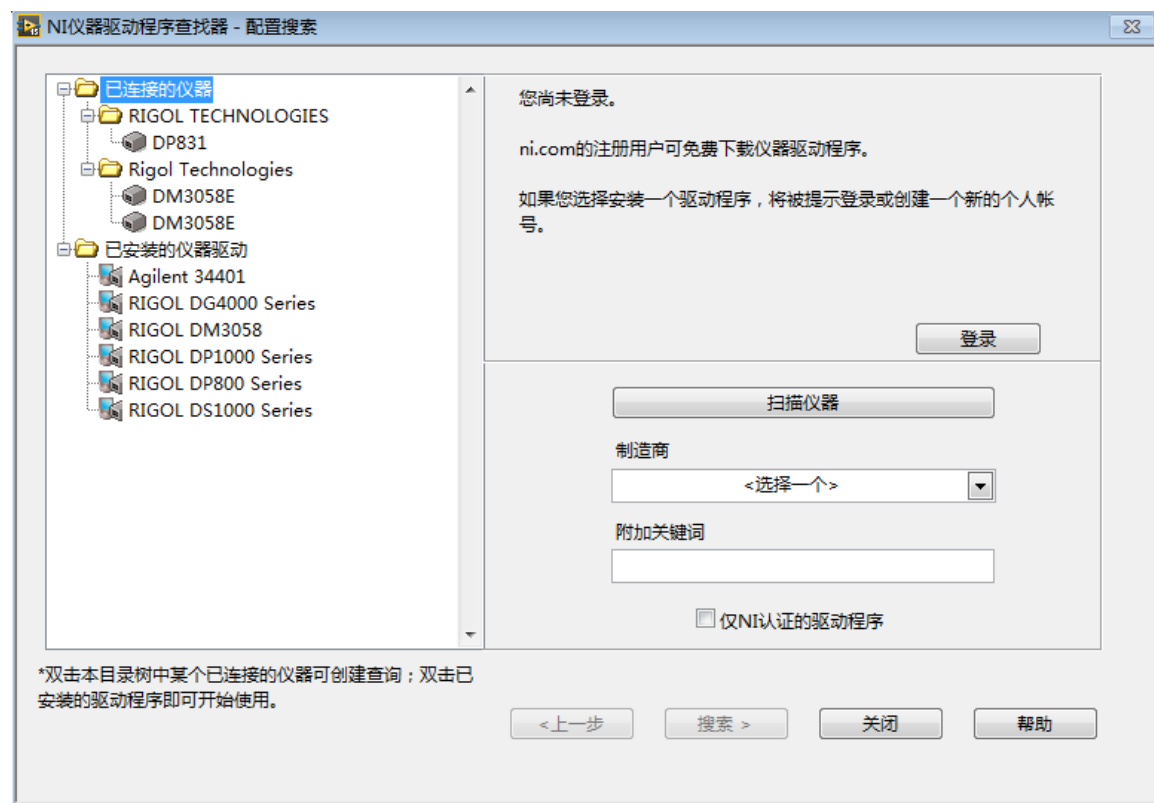


图 2-4 检查 Labview 对仪器的识别

控温程序打开后界面如图 2-5所示：

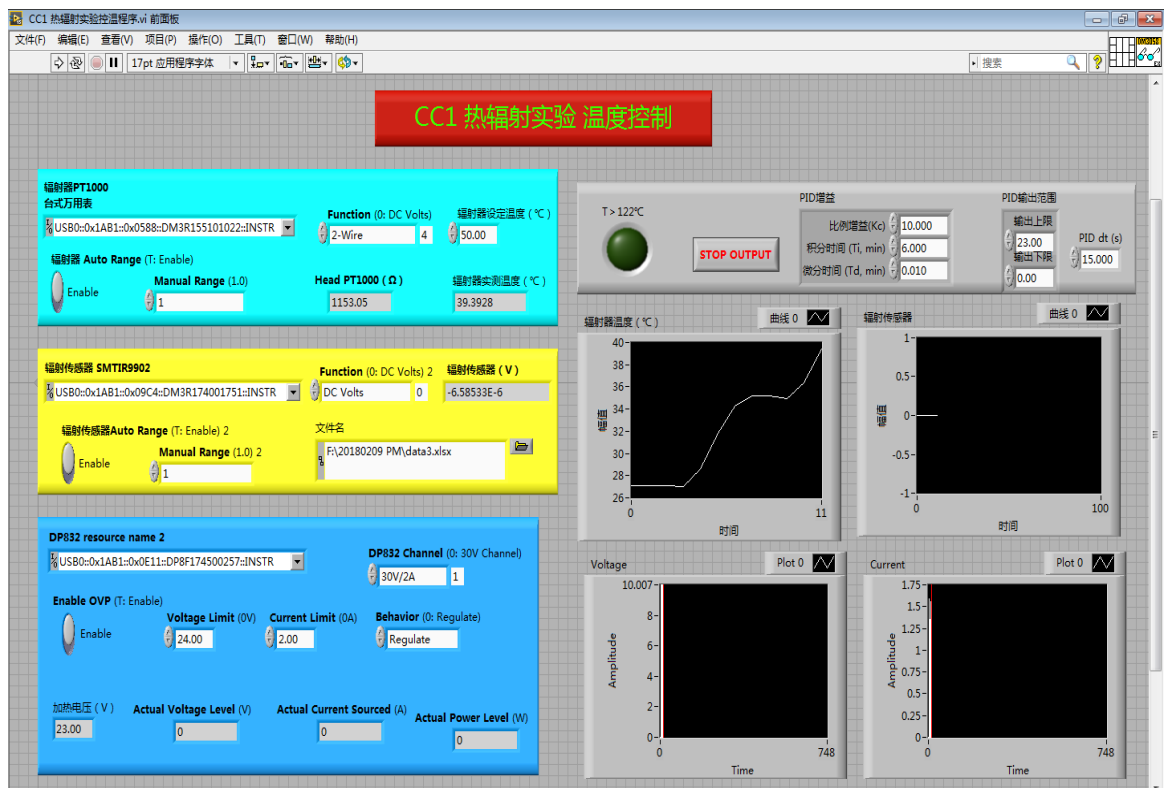


图 2-5 控温程序前面板

辐射器温度探测部分：面板左上部，“辐射器PT1000台式万用表”下拉框请选择连接辐射器PT1000的那台万用表，注意仪器USB地址里的数字要和仪器背后的序列号一致。“Function”选择2-Wire测量电阻，程序会根据测得的PT电阻换算出温度值。“辐射器温度设定”请根据具体实验设置控温目标温度，“辐射器Auto Range”指的是万用表测量时量程是否为自动，按钮在上部为选择“自动量程”。“Head PT1000”和“辐射器实测温度”分别为测得的电阻和对应的实际温度值。

辐射传感器部分：面板左中部，“辐射传感器SMTIR9902”下拉框请选择连接辐射传感器的那台万用表，注意仪器USB地址里的数字要和仪器背后的序列号一致。

“Function”选择DC Volts测量直流电压，“辐射传感器 (V)”为实测的传感器电压。“辐射传感器Auto Range”指的是万用表测量时量程是否为自动，按钮在上部为选择“自动量程”。“文件名”显示的保存参数的文件名和路径，程序设计的可以同时保存“辐射器温度”、“可编程直流电源输出功率”、“辐射传感器输出电压”这三个参数。

可编程直流电源部分：面板左下部，通过对DP832电源进行控制，进而控制辐射

体的加热功率。“DP832 Resource name” 请通过下拉框选择实验台上放置的直流电源，本实验采用同系列的DP832（请核对一下仪器背后的序列号是否一致）。“DP832 channel” 请选择30V/3A（通道2）。“Enable OVP” 是极限参数保护开启按钮，按钮在上面是开启，旁边的“Voltage Limit”、“Current Limit” 分别为最大限制电压、最大限制电流，采用默认值即可（24V，2A）。最下面会显示实际输出的电压、电流、功率。

面板右上方有：温度超过122度报警灯（辐射器温度不能设定超过120度，否则会过热损坏辐射器。程序运转正常时，若温度超过122度会切断直流电源供电）。

“STOP OUTPUT” 按钮，其功能为停止控温（**请用这个按钮结束程序，不要用菜单的红色强制终止运行按钮**）。PID的相关参数，这里用的是Labview的PID工具包里的模块：PID的输出表达式为：

$$PID_{output} = P + I + D = K_c e(t) + \sum \frac{e(t)_{n-1} + e(t)_n}{2} \cdot \frac{K_c dt}{T_i} + \frac{e(t)_{n-1} - e(t)_n}{dt} K_c \cdot T_d \quad (7)$$

其中 $e(t)$ 为设定值和实际值之差（set-act）。本实验控温的PID参数已经调好，实验中采用默认值即可（ $K_c=10$ ， $T_i=6$ ， $T_d=0.01$ ， $dt=15$ ）。PID的输出范围默认设定为（23, 0），这对应于可编程直流电源的输出电压范围为0~23V。

面板的右下方设置了四个波形图表，用于显示辐射器温度、辐射传感器电压、直流电源的输出电压和电流。

本实验内容重点在于辨认和选择实验所需的仪器及其驱动程序。对于有兴趣并且有时间的同学，可在以往LabView编程训练的基础上，优化本实验管理程序，包括增加一台数字多用表全时监测传感器（SMTIR9902）的外壳温度。熟悉控温程序的界面后，就可以设定目标温度，运行程序开始实验（**程序框图采用了while循环，运行程序使用单次运行按钮即可**）。本实验的热敏电阻采用的是PT1000，和温度精确对应关系已经写入程序，这里仅列主要温度的分度表供参考（如表 2）。

表 2 PT1000 温度分度表

电阻（Ω）	1000	1077.935	1155.408	1232.419	1308.968	1385.055	1460.680
温度（℃）	0	20	40	60	80	100	120



## 二、测量物体的辐射面温度对物体辐射强度大小的影响

- 1、选择某一辐射距离（要求每组不一样，至少相差1.0cm），将辐射传感器调至该距离；
- 2、设计至少5个温度控制点（要求每组不一样，至少有两个控温点设置温度相差不小于3.0℃）；由于120℃的断电保护控制，建议设计的控温温度设置值不高于118℃。记录每个控温点（稳定后）所需的电功率以及辐射强度于表1；
- 3、分析数据，探索辐射强度与辐射表面温度之间的关系，并绘制温度-辐射强度曲线图；
- 4、分析数据，探索电源加热功率与辐射表面温度之间的关系；

表 3 黑体温度与辐射强度记录表<sup>3</sup>

温度 $t$ （℃）	20	50	80	.....	117
辐射强度 $P$ （V）					
电源输出功率（W）					

注：温度值个位数要与学号个位数相同，十位或百位数自选。

## 三、测量物体在不同辐射距离 $S$ 的辐射强度 $P$ ，通过拟合给出 $P \sim S$ 之间的关系

- 1、设计至少5个位置测量点；
- 2、将控温度控制目标设置在XX℃，[建议在实验内容二的某个状态（如控温在100℃）完成后，转入本实验内容的测量]；
- 3、移动红外传感器的位置，每移动一定的距离后，记录测得的辐射强度，并记录在表 4中，绘制辐射强度-距离图以及辐射强度-距离的平方图，即 $P-S$ 和 $P-S^2$ 图。
- 4、分析绘制的图形，你能从中得出什么结论，黑体辐射是否具有类似光强和距离的平方成反比的规律？

<sup>3</sup> 本实验可以动态测量，也可以静态测量。实验系统标配为静态测量，PID 控温；建议静态测量时，每个控温点控温（测量温度与目标温度之差小于1℃）时间不少于3分钟。也可以设计动态测量或准静态测量，并与静态测量结果比较。

5、对比距离平方反比律与（平面辐射源的）辐射角关系式（见附录公式（6）），哪个符合得更好？

表 4 黑体辐射与距离关系记录表

距离S（mm）	400	380	360	.....	0
辐射强度P(mV)					

注：（1）距离值的个位数要与学号个位数相同，十位或百位数自选；（2）辐射表面凹进隔热层5mm。

#### 四、测量不同物体表面的发射系数

1、将热辐射传感器移开，更换所需辐射面的辐射体。分别正确连接辐射器PT1000和陶瓷加热器的连线到万用表和可编程直流电源上，控温表设置在60℃，待温度控制好后，将热辐射传感器移至靠近辐射体处，测量并记录该辐射表面上的辐射强度（实验时，保证热辐射传感器与待测辐射面距离相同，便于分析和比较），记录在表 5中。

表 5 黑体表面与辐射强度记录表

所用距离：	黑体面	黑面	粗糙面	光面
	辐射强度（V）			




#### 思考题：

1. 人体热辐射会对传感器计数产生影响（自己可验证），如何消除这种影响？
2. 辐射体的加热功率与辐射体温度之间呈何关系？与辐射传感器的信号值之间呈何关系？为什么？
3. 为何当热辐射传感器太靠近辐射表面时，所测得的辐射强度偏离距离平方反比规律？
4. 能否将SMTIR9902应用于非接触温度测量？
- 5.

每张实验台光滑金属面、粗糙金属面、黑色金属面各 1 个。



- (1) 用光面、黑面或者粗糙面的辐射体中的任一种，完成上述实验内容一至三；
- (2) 继续实验内容四，确保实验内容四中，3 种辐射面全部被测量完成；
- (3) 时间充裕的同学，可选做其余 2 种辐射面的步骤（1）实验内容。

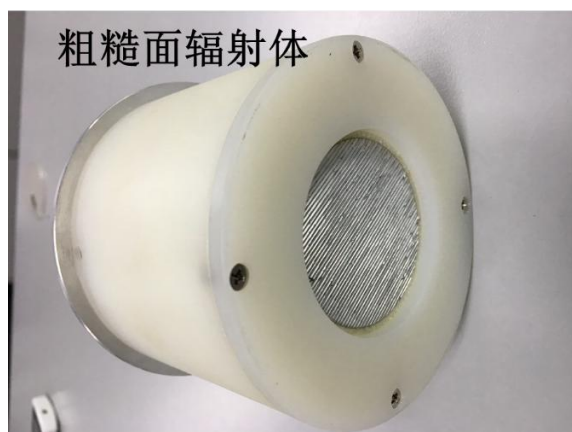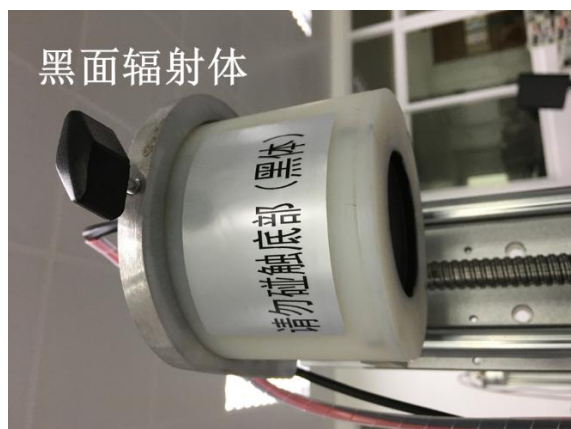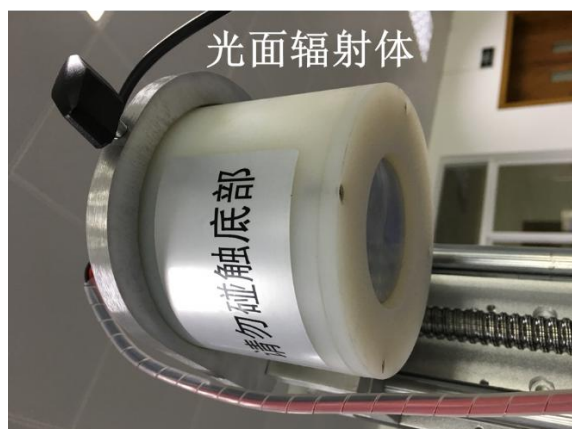

### 3 热辐射传感器与热辐射度测量 B (CC1+A、设计性)

**【实验内容】** (CC1+A, 两人一组, 每人一套仪器分工完成, 共享数据)

#### 五、热辐射传感器的校正及其应用

##### 1. 传感器辐射强度 (辐射通量、或能流密度) 校正

热辐射传感器 (SMTIR9902) 输出为电压值, 它与当地的辐射强度成正比, 但厂家没能给出两者之间的比例系数。能否设计一个实验方案, 校出该系数?

另一些辐射传感器在出厂时已经校验好, 但实际辐射因子往往收到环境太阳或者周围的加热体的影响, 因此, 也建议在使用环境下对传感器进行校正。如何校正?

**方案设计要求:** 获得热辐射传感器 (SMTIR9902) 输出信号与当地辐射强度的定量关系 (式);

##### 2. 传感器测温应用及其校正

###### (1) 带透镜的与不带透镜的辐射传感器的比较

用带透镜的热辐射传感器 (SMTIR9902sil) 测量当地辐射强度, 即重复 CC1 用 SMTIR9902 传感器的测量辐射强度随辐射体表面温度、与辐射表面之间距离的变化; 比较两种传感器的测量结果, 分析原因。

如何用这些传感器非接触测量物体表面温度? 如何使用? 哪个传感器的适用范围更宽?

###### (2) 辐射体表面温度校正

最新的辐射体设计中, 加热器与温度传感器 (PT1000) 直接用导热胶贴在作为辐射体的金属铝的内表面, 金属铝热导率高, 可以认为其表面温度与体温度相同 (鼓励进行建模分析)。

辐射体表面的温度亦可以在实验前用货架商品 FLUKE 热辐射温度计做个校正。**【注意, 目前实验室使用的热辐射计的测温精度为  $2^{\circ}\text{C}$ , 分辨率为  $0.5^{\circ}\text{C}$ 。】**

**方案设计要求:** 获得热辐射传感器 (SMTIR9902sil) 输出信号与辐射表面温度的定量关系; 并且给出其适用范围和使用规范。

## 六、基于LabView控温程序实现（选）

要求：在原有的定点控温的基础上，实现匀速升温 and 匀速降温；并在其控制的温度下连续测量辐射度随温度的变化。

## 七、测量不同物体的防辐射能力（选）

- 1、分别测量在辐射体和热辐射传感器之间放入物体板之前和之后，辐射强度的变化。
- 2、可自己选带阻挡物，如织物、纸、塑料板等；
- 3、放入不同的物体板时，辐射体的辐射强度有何变化，分析原因，你能得出哪种物质的防辐射能力较好，从中你可以得到什么启发。

## 思考题：

1. 为什么测量气温的温度计要放入百叶窗箱子内？
2. 能测量太阳光的温度吗？为什么？
3. 对低温热辐射(温度低于120摄氏度)，为何不采用“光谱仪”的方式记录电磁波谱？如果采用，你会怎么设计（只讲思路）？

## 实验报告要求

要有结论，并在结论中回应是否达到了实验目的，设计是否满足要求。

## 附录 1、 平面辐射源的辐射度计算

设：

1) 辐射面直径为 $2R$ ，辐射面与探测面距离为 $d$ ，则辐射角：

$$tg\theta = \frac{r}{d} \quad (1)$$

2) 最大辐射角满足

$$tg\alpha = \frac{R}{d} \quad (2)$$

3) 辐射面的面辐射功率密度为 $q_a$ ,

1. 单位面元的辐射功率：

$$q_a r d\omega dr \quad (3)$$

2. 单位面元在 $\theta$ 方向角的辐射功率：


$$\frac{1}{2\pi} \cos\theta q_a r d\omega dr \quad (4)$$

3. 探测器所在位置接收的来自该面元的辐射功率：

$$\left(\frac{\cos\theta}{d}\right)^2 \frac{1}{2\pi} \cos^2\theta q_a r d\omega dr = \frac{q_a}{2\pi} \sin\theta \cos\theta d\theta d\omega \quad (5)$$

4. 探测器所接收的总功率(辐射强度)：

$$Q = \frac{q_a}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\omega \int_0^\alpha \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{q_a}{4} (1 - \cos 2\alpha) \quad (6)$$

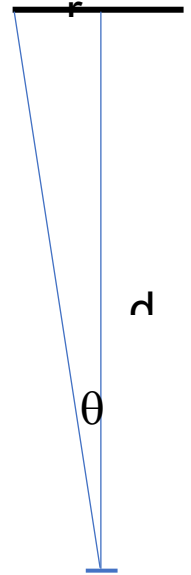

因此，对平面辐射源，辐射强度与距离的关系不直接表达在平方反比公式中，而是需要通过公式(6)体现。

#### 4 热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的验证 (CC1+B)

##### 【实验目的】

- 1、定量测量黑体辐射谱，验证导致量子论产生的普朗克定律；
  - a) 黑体辐射谱的特征
  - b) 黑体辐射谱与温度的关系
- 2、学习使用多种光谱仪测量范围更宽的光谱
  - a) 光谱仪的校正
  - b) 光谱的衔接

##### 【实验器材】

表1 实验器材

	型号	规格		备注
	溴钨灯光源（含控制器）	电 流 (A)	实测色温 (K)	出厂前校正
		1.7	2999	
		1.6	2889	
		1.5	2674	
		1.4	2548	
		1.3	2455	
		1.2	2303	
		1.1	2208	
		1.0	2101	
		0.9	2001	
	WHS-1型黑体辐射实验仪（天津拓普）	波长范围： 800-2500 nm 准直镜焦距： f=302.5 mm 相对孔径： D/F=1/7 狭缝宽度： 0—2.5 mm连续可调 色散元件： 300L/mm 衍射光栅 1400nm闪耀		
	Flight FLA4000可			

	见光光谱仪（杭州晶科）		

## 【实验内容】

用可见和红外波段光谱仪测量热辐射并验证黑体辐射定律

以溴钨灯为辐射源，设定 3 至 4 个温度点（对应于溴钨灯的电流），分别在红外波段和可见光波段测量溴钨灯的辐射谱。

[实验方案提示]

连接计算机、单色仪、接收单元、电控箱、溴钨灯电源、溴钨灯。（各连接线接口一一对应，不会出现插错现象）

### 1) 红外波段光谱测量

连接光纤光谱仪至计算机，打开测量软件；

- (1) 打开计算机、电控箱及溴钨灯电源，使机器预热 20 分钟。
- (2) 将溴钨灯电源的电流调节为 XXA，溴钨灯对准红外光谱仪的取光口，扫描一条从 800~2500nm 的曲线；（可对不同的色温设定点下测量数条曲线）

### 2) 可见光波段光谱测量

- (3) 将光纤光谱仪的取光光纤对准溴钨灯，获取可见光光谱；
- 3) 从计算机中分别取出光谱数据，并合成为一条从 350~2500nm 范围的光谱；
- 4) 通过数据处理，验证普朗克定律，斯忒藩—波尔兹曼定律，维恩位移定律。
- 5) 分析数据（含误差分析）。
- 6) 实验报告（含合成后的光谱数据电子版）。

## 思考题：

1. 可见光谱仪的光强单位是什么？红外光谱仪的辐射度单位是什么？怎样才能把两组光谱连接起来。

## 参考文献

1. Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Black-body\\_radiation](https://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation) ;
2. 黑体实验装置说明书 (CC1+)
3. SMTIR99XX 系列红外传感器说明书  
其他自己调研。